

車いすをワンタッチで固定。 乗降をもっと簡単かつスムーズに。

Wheel Chair
MiKi

Come Come series

カムカムシリーズ

車椅子簡易
固定システム
対応車いす ※a

車椅子簡易固定システムを搭載した車いす移動車対応の車いすです。日常使いにもご使用いただけます。

また、**車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが定めた衝突実験等の厳しい規格をクリア**しております。

快適な移動をお手伝いし、乗降をもっと簡単かつスムーズに行え、安心してご利用いただけます。



車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドラインに準拠。※a

※写真の車両はトヨタ自動車(株)の一例です。

車椅子簡易固定システムに対応したワンタッチで固定する方式

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが推奨する、車いすを自動車などにワンタッチで固定する方式。この装置を使うことで、複雑な固定操作が不要になり、車いすのアンカーバーを自動でしっかりとホールドします。

車椅子簡易固定システム対応アンカーバー



車椅子簡易固定システム対応アンカーバー

※a 車椅子簡易固定標準化コンソーシアムについて (主催団体:一般社団法人日本福祉車輛協会より)

車椅子・車いす移動車・バスを開発製造するメーカー等が協力し、「車椅子の自動車等へのワンタッチ固定機器に関する規格化」に沿った車椅子簡易固定システム対応機器類を極力早期に開発、市場投入が出来るよう、またより多くのご利用者様に新しい規格とそのメリットを知っていただけるよう、連携活動するためのプラットフォームです。

車いす移動車への
乗り降りや固定が、
便利で安全に。



※ミキの車いすはコンパクトに折りたためます。

補装具 レディメイド式

品番 **MVM-20G5** TAIS: 00122-000705 **¥160,000**(非課税価格)


自走型

重量: 15.3kg

前座高: 435mm

● 商品コード / CJ01168

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、シート角度: 3.6°、ヘッドサポート標準装備

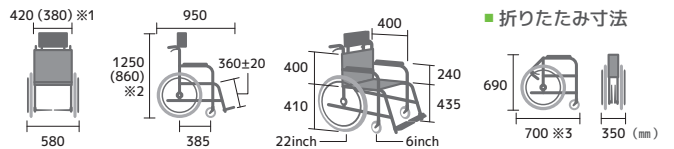

■ 折りたたみ寸法



肘パッド下ベルト通し

肘パッドの下には、車いす用移動車のシートベルトが簡単に装着できるように工夫されています。



スイングアウト

フット・レッグサポートを後方に回転させて開くことができますので、移乗対象により近づくことができます。また、取り外すこともできます。



ヘッドサポート

着脱式のヘッドサポートです。ご利用者に合わせて高さを調整でき、不要な場合は簡単に取り外すこともできます。

■ カテゴリー&機能マーク



スイングアウト 介助用ブレーキ 可折れジョイント クッションキャスタ ハイポリマータイヤ※4

※4 ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

耐荷重100kg

■ シートカラー(ストライプシート)



ブルー(A-2)ナイロン

※座の生地はナイロンシートとなります。

品番・商品コードを発注時にご指示ください。

※1 アームパイプ内々の寸法です。()内は座シートの幅です。
※2 ヘッドサポートを含めた寸法です。()内は押し手までの高さです。
※3 はフット・レッグサポートを取り外した寸法です。

※掲載の価格は非課税価格です。 26.05

Wheel Chair
Miki 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

会社や商品についての情報のご確認は、MiKiホームページまで
<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで

〒484-0928 愛知県犬山市字七ツ屋51-3
TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。

お問い合わせ

